



平衡灵动 易取通达

FlexTake™ 颅内取栓支架



质享 / 智创 / 致新

Excellent Quality - Intelligent Creation - Brilliant Innovation

禾木(中国)生物工程有限公司

网址: www.hemochina.com E-mail: info@hemochina.com

©2023 HEMO CHINA. All rights reserved. HEMO-NPDATA-202307-G1-V1.00



扫描二维码
关注[禾木中国]公众号
了解更多相关信息



更长的支架长度

更加有利于支架包覆住血栓，
增大取栓成功概率


细分的支架外径

更加有利于术者根据不同直径
的血管选择不同规格的产品

支架中部增加显影标记

更加有利于术者判断支架与血栓的
相对位置,便于术者定位支架

产品结构

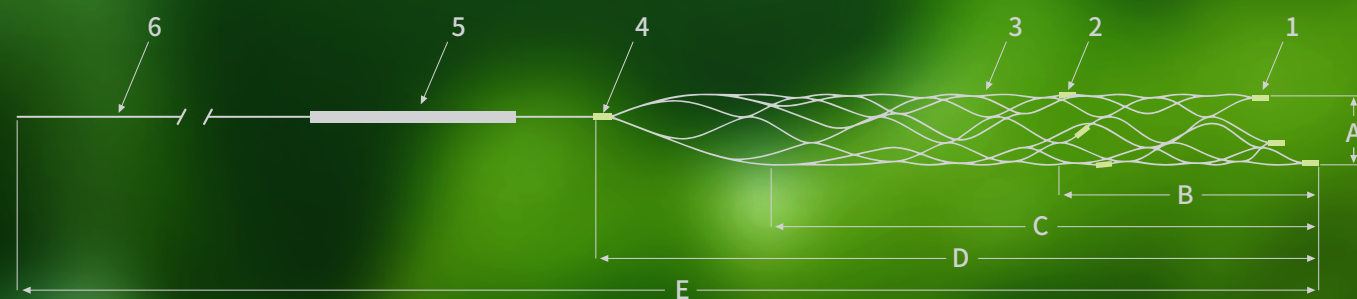

1.远端不透射线标记

A.支架标称直径

2.中间不透射线标记

B.中间不透射线标记到远端不透射线标记的长度

3.自扩张支架(镍钛合金)

C.自扩张支架有效长度

4.近端不透射线标记

D.近端不透射线标记到远端不透射线标记的长度

5.导入鞘(PTFE)

E.产品总长度

6.推送丝(镍钛合金)

颅内取栓支架产品规格型号

型号规格	支架尺寸 (mm)	支架标称 直径(mm)	适配血管 内径(mm)	支架有效 长度(mm)	产品总 长度(mm)	不透射线标记数量			最小输送导管内径 (mm/inch)
						近端	中间	远端	
PARD-3-10	3×10	3	2.0-3.0	10	1850	1	2	2	0.53/0.021
PARD-3-20	3×20	3	2.0-3.0	20	1850	1	2	2	0.53/0.021
PARD-4-20	4×20	4	2.5-4.0	20	1850	1	3	3	0.53/0.021
PARD-4-40	4×40	4	2.5-4.0	40	1850	1	3	3	0.53/0.021
PARD-5-20	5×20	5	3.5-4.5	20	1850	1	3	4	0.69/0.027
PARD-5-30	5×30	5	3.5-4.5	30	1850	1	3	4	0.69/0.027
PARD-6-20	6×20	6	4.0-5.5	20	1850	1	3	4	0.69/0.027
PARD-6-30	6×30	6	4.0-5.5	30	1850	1	3	4	0.69/0.027